

Iconos de la barra de herramientas:

Sol
Indica que el monitor está recopilando lecturas en intervalos seleccionados para la parte de VIGILIA del estudio.


Hora
Cuando el monitor no esté realizando una lectura, indicará la hora correcta.

Pila
Indica el voltaje bajo de la pila; ES NECESARIO SUSTITUIR LAS PILAS.

Reloj
Indica que se está realizando un estudio de PAA programado.

**Systolic/Diastolic
(Sistólico/Diastólico)**

Botones reservados para programación futura

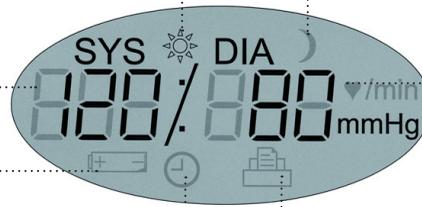

Luna
Indica que el monitor está recopilando lecturas en intervalos seleccionados para la parte de LETARGO del estudio.

Lectura de PA
- Durante una lectura de PA, indica la presión del brazalete en mmHg.
- Inmediatamente después de una lectura de PA, la pantalla muestra los resultados de la lectura, la presión arterial en mmHg seguida de la frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto.


Impresora
Indica el número de lecturas en la memoria.

Inicio/Parada

- **PARA ENCENDER:** cuando el monitor esté apagado, pulse el botón Inicio/Parada.
- **PARA APAGAR:** cuando el monitor esté encendido, pero no esté realizando una lectura, pulse y mantenga pulsado el botón Inicio/Parada hasta que escuche cinco pitidos rápidos (aprox. 5 segundos).
- **PARA CANCELAR UNA MEDICIÓN:** cuando el monitor esté realizando una lectura y se muestre la presión del brazalete, pulse el botón Inicio/Parada.
- **PARA INICIAR EL ESTUDIO DE PAA PROGRAMADO:** cuando la hora esté parpadeando, pulse el botón Inicio/Parada.
- **PARA INICIAR UNA LECTURA DE PA ÚNICA:** cuando se muestre la hora, pulse el botón Inicio/Parada.

Barra de menú

Barra de herramientas

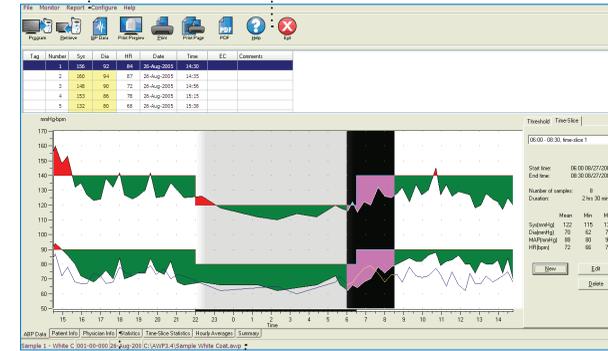

Pestañas

Barra de estado



Programa
Programa el monitor para un estudio de PAA.



Recuperar
Recupera un estudio de PAA del monitor.



Datos de PS
Abre un estudio de PAA.



Vista previa de impresión
Muestra la vista preliminar de un informe.



Imprimir
Imprime un informe.



Imprimir página
Imprime la página del informe de los datos mostrados.



PDF
Crea un archivo PDF de un informe.



Ayuda
Navega por los archivos de ayuda.



Salir
Cierra AccuWin Pro v3.

SunTech[®] Oscar2[™]
24-HR ABP

Primeros pasos

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Estate
Eynsham, Oxfordshire
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Level 19, Two IFC
8, Finance Street, Central
Hong Kong
Tel: + 852.2251.1949
Fax: + 852.2251.1950

www.CN.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829

www.CN.SunTechMed.com

Instale el software

1

Inicie su ordenador e instale *AccuWin Pro v3* utilizando el CD de instalación. Si el CD no arranca automáticamente, utilice Windows Explorer para encontrar y ejecutar "Autorun.exe" en el CD.



Instale su monitor

2


Inserte 2 pilas AA en la parte posterior del monitor *Oscar 2*. Conecte el monitor y el puerto de salida en serie del ordenador con el cable de la interfaz.



Comuníquese con su monitor

3


Inicie *AccuWin Pro v3*. Desde la barra de menú, seleccione Monitor y luego Configurar puerto. Una vez que el *Oscar 2* está conectado a la PC con el cable USB, se selecciona automáticamente el puerto USB.

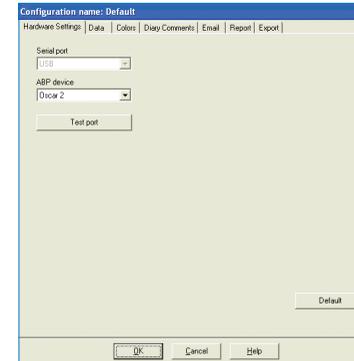

Programa su monitor

4

Seleccione el icono Programa y llene los parámetros para un nuevo estudio de PAA. Puede introducir el nombre y la identificación del paciente aquí, o puede añadirlos después al recuperar los datos del monitor.

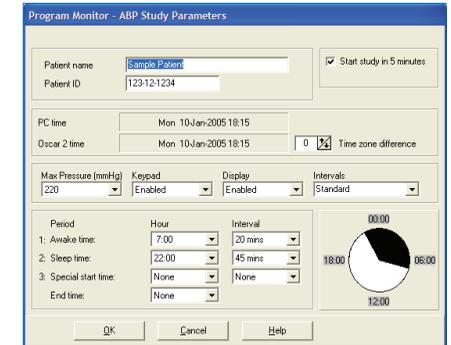

Colóquelo a su paciente el monitor y el brazalete Orbit

5

Seleccione la dimensión adecuada del brazalete utilizando un indicador de RANGE y un marcador de INDEX para encontrar una circunferencia de brazo correcta. Coloque el brazalete Orbit deslizando la manga hacia arriba por el brazo del paciente y dejando que el tubo salga por encima del brazalete. Asegúrese de que el indicador ARTERY esté sobre la arteria braquial y enrolle el brazalete con una suave presión. Conecte el tubo del brazalete al monitor, coloque el monitor en la bolsa y ajústelo al paciente con el cinturón.



Prepare a su paciente para el estudio

6

Con el monitor encendido, pulse el botón Inicio/Parada (▶/■) en el monitor para comenzar manualmente una lectura de PA. Compruebe que el monitor esté funcionando correctamente. Prepare a su paciente sobre el funcionamiento del monitor revisando la sección Preparación e información del paciente de la Guía del usuario del *Oscar 2*.


¡Nota! Asegúrese de que el paciente sepa que debe reducir al mínimo el movimiento y dejar que su brazo descanse ligeramente alejado de su cuerpo para que el monitor pueda realizar una lectura adecuada. Su paciente ya está preparado para el estudio de PAA.



Recupere los datos de PAA del Oscar 2

7

Cuando su paciente vuelva del estudio de PAA, retire el monitor y los accesorios y conecte el *Oscar 2* al ordenador (consulte el paso 2). Inicie *AccuWin Pro v3* y seleccione el icono Recuperar. Después de la recuperación de datos, siga las instrucciones en pantalla para guardar el estudio. La información del estudio se muestra ahora.

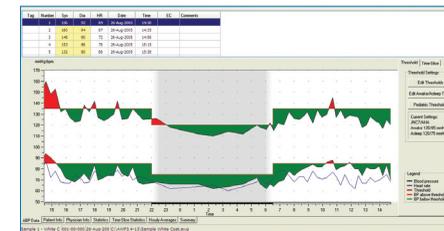

Revise el estudio de PAA e imprima un informe.

8

Edite los datos del estudio con las pestañas Datos PSA, Información del paciente y Información del médico. Revise el estudio utilizando las pestañas Estadísticas y Promedios por horarios. Finalmente, seleccione el icono Vista previa del reporte para configurar la impresora e imprimir el informe, o seleccione el icono PDF para crear un archivo PDF del informe.

