



 SunTech® **Vet25™**
BP MONITOR




**Blutdruckmonitor für
Spot-Check-Messung und Monitoring
bei Haustieren**

SunTech Vet25

Der tragbare, wiederaufladbare SunTech®-Monitor Vet25™ liefert rasch und unkompliziert zuverlässige Blutdruckwerte im Rahmen eines Check-Ups, als Einzelmessungen sowie in der Überwachung von Haustieren vor und nach Eingriffen. Die Messintervalle für automatische Blutdruckmessungen während des Monitorings sind einstellbar. Mit der bewährten und bewegungstoleranten Advantage™-Technologie für die Blutdruckmessung an Haustieren ermittelt der Vet25 fast geräuschlos genaue Ergebnisse. Der intuitiv bedienbare Touchscreen bietet alle Funktionen für die Kontrolle und Analyse der Blutdruckdaten.

Allgemeine Merkmale

- Zuverlässig:** Durch die bewegungstolerante SunTech-Technologie sind Fehlmessungen mit dem Vet25 weitgehend ausgeschlossen.
- Einfache Bedienung:** Auf dem intuitiv bedienbaren Touchscreen sind alle Funktionen für die Kontrolle, Analyse und Übertragung der Blutdruckdaten vorhanden. Ein Gerät für Tierkliniken, nicht für die Forschung.
- Genau:** Der Algorithmus für die Blutdruckmessung wurde speziell für Haustiere an einer der führenden veterinärmedizinischen Hochschulen entwickelt.
- Kontinuierliches Monitoring:** Die individuell einstellbaren Intervalle für die Blutdruckmessung sind eine wesentliche Vereinfachung für das Monitoring während Eingriffen.
- Speicher:** Es werden bis zu 960 Datenpunkte gespeichert; der Speicherinhalt bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Aus den gespeicherten Messungen können bestimmte Werte ausgewählt und zur automatischen Mittelwertbildung herangezogen werden.
- Tragbar:** Durch die netzunabhängige Versorgung ist das Gerät ideal für den Einsatz an verschiedenen Orten.
- Wiederaufladbar:** Sobald das Gerät am Netz angeschlossen ist, wird die Batterie geladen. Es entsteht also weniger Abfall durch Einwegbatterien.
- Datenübertragung:** Über Bluetooth können Daten an einen PC übertragen werden, wo eine spezielle Software-Anwendung Trends und Reports erstellt. Mit dieser Anwendung können Sie darüber hinaus Report-Daten im PDF- oder CSV-Format exportieren.

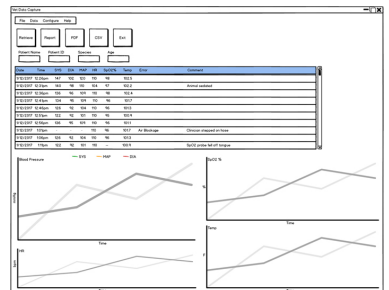



Technische Daten

Vet25-Lieferumfang:

- Vet25-Monitor
- Schutzgehäuse in flamingopink, pfauenblau oder laubfroschgrün
- Blutdruckmanschetten für Veterinärmedizin, Größe 1–6
- Manschettenschlauch, 1,8 m
- Netzteil

Allgemeine Spezifikationen

Systole:	40–265 mmHg
Diastole:	20–200 mmHg
Mittlerer arterieller Druck:	27–222 mmHg
Herzfrequenz:	25–300 /min
Gewicht:	ca. 950 g (mit Batterie)
Abmessungen:	ca. 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantie:	2 Jahre für den Monitor 90 Tage für Manschetten/Schlauch

Zubehör

Gehäuse für SunTech Vet25

Bei dem abnehmbaren Schutzgehäuse mit bequemem Griff haben Sie die Wahl zwischen 3 Farben.



Flamingopink



Pfauenblau



Laubfroschgrün

Netzteil

Der Vet25 ist ein tragbares Gerät, das Sie problemlos von einem Raum zum anderen mitnehmen können, wenn Sie es brauchen. Schließen Sie zum Laden des Lithium-Ionen-Akkus im Vet25 einfach das Steckernetzteil an. Das Netzteil wird mit 4 verschiedenen Steckervarianten geliefert und ist daher mit fast sämtlichen Netzanschlussystemen weltweit kompatibel.

SunTech-Manschetten für die Veterinärmedizin



Angenehme Manschette durch weiches Material und abgerundete Ecken. Durch die unterschiedlichen Farben der Manschetten von SunTech Medical lässt sich die richtige Größe rasch auswählen; die Bereichsmarkierungen erleichtern das korrekte Anlegen. Mit dem Vet25-Blutdruckgerät erhalten Sie Manschetten der Größe 1 bis 6. **Die Manschetten von SunTech können auch mit anderen Blutdruckgeräten für Veterinärmedizin verwendet werden! Fragen Sie nach dem SunTech-Umrüst-Kit für Veterinärmanschetten.**


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade[™]

Seit über 30 Jahren widmen wir uns der Entwicklung erstklassiger Blutdruck-Technologie. Daher sind wir sicher, dass bei den Messungen nichts verborgen bleibt – und Sie können es auch sein. Das ist unsere Tradition. Das ist SunTech Medical. **Das macht den Unterschied zur Spitzenklasse.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel.: + 1.919.654.2300
1 800 421 8626
Fax: +1 919 654 2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Großbritannien
Tel.: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: +44 (0) 1865 884 235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Vertrieb)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: +86 755 29588829
SunTechMed.com.CN





Artikelnummern für SunTech Vet25

Vet25-Systemmonitore

- 99-0170-00 Vet25 Monitor, Gehäuse in flamingopink
- 99-0170-01 Vet25 Monitor, Gehäuse in pfauenblau
- 99-0170-02 Vet25 Monitor, Gehäuse in laubfroschgrün

SunTech-Blutdruckmanschetten für die Veterinärmedizin

98-0400-80	Manschette 1	20 Stück	Bereich 3–6 cm
98-0400-81	Manschette 2	20 Stück	Bereich 4–8 cm
98-0400-82	Manschette 3	20 Stück	Bereich 6–11 cm
98-0400-83	Manschette 4	20 Stück	Bereich 7–13 cm
98-0400-84	Manschette 5	20 Stück	Bereich 8–15 cm
98-0400-F1	Manschette 6	20 Stück	Bereich 12–19 cm
98-0400-F3	Manschette 7	20 Stück	Bereich 17–25 cm
98-0240-00	Manschetten 1–6	6 Stück	
91-0028-75	Manschettschlauch, 1,8 m		
91-0028-76	Manschettschlauch, 3 m		

Zubehör

- 39-0195-00 Gehäuse in flamingopink
- 39-0195-01 Gehäuse in pfauenblau
- 39-0195-02 Gehäuse in laubfroschgrün
- 19-0020-00 Netzteil
- 98-0900-01 Lithium-Ionen-Ersatzakku

Garantieerlängerung

- 83-0022-00 Garantieerlängerung um ein Jahr
- 83-0022-01 Garantieerlängerung um drei Jahre

Vertragsbedingungen für die Garantieerlängerung

Eine Garantieerlängerung kann erworben werden:

- zum Zeitpunkt des Erstkaufs
- vor Ablauf des ursprünglichen Garantiezeitraums