



 SunTech[®] **Vet25[™]**
BP MONITOR




**Moniteur de mesure de la PA ponctuelle
et en mode continu**
pour animaux domestiques

SunTech Vet25

Le moniteur SunTech® Vet25™ portable et rechargeable permet la réalisation rapide et facile de mesures fiables de la pression artérielle (PA) pour des examens de check-up, des mesures ponctuelles et pendant la surveillance d'animaux domestiques avant et après une intervention. Les intervalles peuvent être réglés pour effectuer automatiquement des mesures de la PA pendant une période de surveillance. Doté de la technologie de PA vétérinaire Advantage™ éprouvée de SunTech, le Vet25 réalise des mesures silencieuses de PA tolérante aux mouvements, et fournit des résultats précis. L'interface tactile intuitive fournit aux utilisateurs toutes les fonctionnalités requises pour la visualisation et l'analyse des données de PA.

Caractéristiques standard

- Fiabilité :** Grâce à la technologie tolérant les mouvements de SunTech, le Vet25 affiche un taux de succès élevé pour les mesures de la PA.
- Facilité d'utilisation :** L'interface tactile intuitive possède toutes les fonctionnalités requises pour la visualisation, l'analyse et le transfert des données de PA. Conçu pour les cliniques vétérinaires, pas pour les chercheurs.
- Précision :** L'algorithme PA a été spécifiquement développé pour les animaux domestiques par des experts dans une grande école vétérinaire.
- Surveillance continue :** Avec les intervalles définis par l'utilisateur pour la mesure de PA, la surveillance pendant les interventions est simple.
- Mémoire :** Jusqu'à 960 points de données sont conservés même quand l'appareil est arrêté. L'utilisateur peut sélectionner des mesures spécifiques dans la mémoire de l'appareil et établir une moyenne de la PA de façon automatisée.
- Portabilité :** L'appareil alimenté par batterie est facile à déplacer entre différents lieux de surveillance.
- Rechargeable :** La batterie se recharge quand l'appareil est branché sur une prise CA, ce qui réduit les déchets liés aux piles jetables.
- Transfert des données :** Les données peuvent être transférées vers une application logicielle d'évaluation et de visualisation des données pour un PC via le Bluetooth. Utiliser l'application PC pour exporter les rapports au format PDF ou CSV.

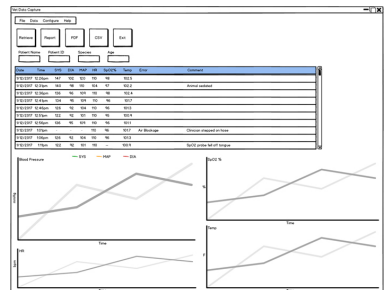



Spécifications techniques

Le Vet25 comprend les éléments suivants :

- Moniteur système Vet25
- Coque de protection rose flamand, bleu paon ou vert rainette
- Brassards de prise de tension artérielle vétérinaires, tailles 1-6
- Tube patient, 1,8 m
- Adaptateur CA

Spécifications générales

Systolique :	40 à 265 mmHg
Diastolique :	20 à 200 mmHg
Pression artérielle moyenne :	27 à 222 mmHg
Fréquence cardiaque :	25 à 300 bpm
Poids de l'appareil :	env. 950 g (avec la batterie)
Dimensions :	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantie :	2 ans pour le moniteur 90 jours pour les brassards/ tubes

Accessoires

Coque SunTech Vet25

La coque de protection amovible est disponible en 3 coloris et possède une poignée pratique.



Rose flamand



Bleu paon



Vert rainette

Adaptateur CA

Le Vet25 est un appareil portable qui peut être déplacé facilement d'une salle à une autre si besoin. Il suffit de brancher l'adaptateur CA sur le Vet25 pour recharger la batterie lithium-ion. L'adaptateur CA comprend quatre configurations de branchement pour satisfaire à la plupart des exigences de puissance internationales.

Brassards vétérinaires SunTech



Les matériaux doux et les coins arrondis offrent une solution de brassard agréable à porter. Les brassards de PA SunTech Medical ont un codage couleur pour sélectionner rapidement la bonne taille, et les flèches indiquant la plage permettent le dimensionnement et l'ajustement précis du brassard. L'appareil de prise de tension artérielle Vet25 inclut les tailles de brassard de 1 à 6. **Les brassards de PA SunTech Vet peuvent être utilisés avec d'autres moniteurs de PA vétérinaires !** Renseignez-vous sur notre **kit de transformation de brassard SunTech Vet.**


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade[™]

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre technologie de mesure de la pression artérielle reconnue à l'échelle mondiale, et si nous sommes certains de ne jamais rater le moindre battement – vous pouvez l'être également. C'est notre héritage. C'est SunTech Medical. **C'est LA différence à l'échelon clinique.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tél. : + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax : + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Grande-Bretagne
Tél. : + 44 (0) 1865.884.234
Fax : + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tél. : + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventes)
+ 86.755.29588665 (S.A.V.)
Fax : + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Références SunTech Vet25

Moniteurs système Vet25

- 99-0170-00 Moniteur Vet25, coque rose flamand
- 99-0170-01 Moniteur Vet25, coque bleu paon
- 99-0170-02 Moniteur Vet25, coque vert rainette

Brassards de PA vétérinaires SunTech

98-0400-80	Brassard #1	Boîte de 20	Circonférence 3-6 cm
98-0400-81	Brassard #2	Boîte de 20	Circonférence 4-8 cm
98-0400-82	Brassard #3	Boîte de 20	Circonférence 6-11 cm
98-0400-83	Brassard #4	Boîte de 20	Circonférence 7-13 cm
98-0400-84	Brassard #5	Boîte de 20	Circonférence 8-15 cm
98-0400-F1	Brassard #6	Boîte de 20	Circonférence 12-19 cm
98-0400-F3	Brassard #7	Boîte de 20	Circonférence 17-25 cm
98-0240-00	Brassards 1-6		Paquet de 6
91-0028-75	Tube patient, 1,8 m		
91-0028-76	Tube patient, 3 m		

Accessoires

- 39-0195-00 Coque rose flamand
- 39-0195-01 Coque bleu paon
- 39-0195-02 Coque vert rainette
- 19-0020-00 Adaptateur CA
- 98-0900-01 Batterie lithium-ion de rechange

Programme d'extension de garantie

- 83-0022-00 Extension de garantie 1 an
- 83-0022-01 Extension de garantie 3 ans

Conditions relatives à l'extension de garantie

L'extension de garantie peut être achetée :

- Au moment de la vente initiale
- Avant la fin de la période de garantie initiale