



Monitor de Pressão Arterial Pontual e Contínua

para Animais de Estimação

Vet25

SunTech Vet25

Com rapidez e praticidade, o monitor SunTech® Vet25™ realiza medições confiáveis da pressão arterial (PA) para exames de bem-estar, testes rápidos e durante o monitoramento de animais de estimação pré e pós-procedimentos veterinários. Os intervalos podem ser configurados para fazer as leituras de PA automaticamente durante um período de monitoramento. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet25 executa silenciosamente medições PA tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA.

Características padrão

Confiabilidade: Graças à tecnologia de tolerância ao movimento da SunTech, o Vet25 tem um elevado índice de sucesso em leituras de PA.

Praticidade: A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar, analisar e transferir os dados da PA. Uso indicado para clínicas veterinárias, não pesquisadores.

Precisão: O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.


Monitoramento contínuo: O monitoramento durante procedimentos é simples, com intervalos definidos pelo usuário para a medição PA.

Memória: Até 960 pontos de dados são salvos e mantidos mesmo quando o dispositivo está desligado. O usuário pode selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

Portabilidade: Quando alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente movido para diferentes locais de monitoramento.

Recarregável: A bateria é recarregada quando o dispositivo está conectado à alimentação CA, reduzindo o desperdício da bateria.

Transferência de dados: Os dados podem ser transferidos para um software aplicativo para análise de tendências e geração de relatórios para computador através de conexão Bluetooth. Use o aplicativo para PC para exportar relatórios em formato PDF ou CSV.

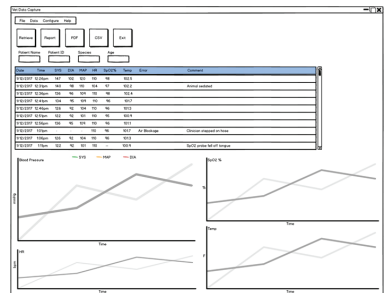



Especificações técnicas

O Vet25 inclui:

- Monitor do sistema Vet25
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,8 m
- Adaptador CA

Especificações gerais

Sistólica:	40 a 265 mmHg
Diastólica:	20 a 200 mmHg
Pressão arterial média:	27 a 222 mmHg
Frequência cardíaca:	25 a 300 BPM
Peso do dispositivo:	aprox. 950 gramas (com bateria)
Dimensões:	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantia:	2 anos para o monitor 90 dias para os manguitos/mangueiras

Acessórios

Capa do SunTech Vet25

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

Adaptador CA

O Vet25 é um dispositivo portátil que pode ser facilmente deslocado um ambiente para outro quando necessário. Basta conectar o adaptador CA para recarregar a bateria de íon de lítio ao Vet25. O adaptador CA vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

Manquitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet25 PA vem com manguitos de tamanho 1-6. A linha de manguitos

PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.

SUNTECH

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. É a diferença de padrão clínico.



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2-3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Números de peças do SunTech Vet25

Monitores do sistema Vet25

- 99-0170-00 Monitor Vet25, capa na cor rosa-flamingo
- 99-0170-01 Monitor Vet25, capa na cor azul-pavão
- 99-0170-02 Monitor Vet25, capa na cor verde-ervilha

Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech

98-0400-80-VET	Manguito N°1	caixa com 20	alcance de 3-6 cm
98-0400-81-VET	Manguito N°2	caixa com 20	alcance de 4-8 cm
98-0400-82-VET	Manguito N°3	caixa com 20	alcance de 6-11 cm
98-0400-83-VET	Manguito N°4	caixa com 20	alcance de 7-13 cm
98-0400-84-VET	Manguito N°5	caixa com 20	alcance de 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito N°6	caixa com 20	alcance de 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito N°7	caixa com 20	alcance de 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	embalagem com 6	
91-0028-75	Mangueira do paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Mangueira do paciente, 3 m		

Acessórios

- 39-0195-03 Capa na cor rosa-flamingo
- 39-0195-04 Capa na cor azul-pavão
- 39-0195-02 Capa na cor verde-ervilha
- 19-0020-00 Adaptador CA
- 17-0026-00 Substituição da bateria de íon de lítio

Programa de Garantia Estendida

- 83-0022-00 Garantia de um ano estendida
- 83-0022-01 Garantia de três anos estendida

Termos e Condições da Garantia Estendida

A garantia estendida pode ser adquirida:

- No ato da compra original
- Antes da expiração do período de garantia inicial