

ABPM




SunTech[®] *Oscar 2*[™]
24-HR ABPM



Verkrijgbaar met:

SphygmoCor
inside 

24 uurs ambulant
bloeddrukmonitoringsysteem

SunTech Oscar 2

Het Oscar 2™-systeem van SunTech Medical® zet de standaard voor 24-uurs ambulante bloeddrukmonitoring (ABPM) met de meest recente en geavanceerde monitoringstechnieken, door gebruik te maken van eigendomsrechtelijk beschermde bewegingstolerante technologie die voldoet aan de hoogste klinische standaarden waardoor het comfort voor de patiënt door middel van innovatie wordt geoptimaliseerd, en medici kunnen beschikken over praktische interpreterende analyses.

Het Oscar 2-systeem is onafhankelijk getest en voldoet aan de nauwkeurigheds- en prestatie-eisen van de British Hypertension Society en de European Society of Hypertension International, en aan de AAMI-SP10-normen. Dit systeem wordt standaard geleverd met zowel de gepatenteerde Orbit™ ABPM-manchet als de interpreterende software van AccuWin™ Pro 4.

Standaardfuncties

SunTech-bewegingstolerantie

Het Oscar 2-systeem is voorzien van het bewegingstolerante oscillometrische bloeddruk algoritme waarin klinische nauwkeurigheid en effectieve gegevensverzameling wordt gecombineerd.

Eventmarkering

Een voor de patiënt toegankelijke toets voor het markeren van voorvallen zorgt voor extra patiëntgegevens tijdens het onderzoek en maakt tegelijkertijd een moeiteloze ervaring voor de patiënt mogelijk.

Gepatenteerde Orbit ABPM-manchetten

Onze gepatenteerde *Orbit*-manchet biedt comfort voor de patiënt zonder klinische nauwkeurigheid te compromitteren.


Optionele functies

SphygmoCor Inside

SunTech Medical biedt de eerste en enige ambulante bloeddrukmonitor met SphygmoCor Inside voor niet-invasieve meting van centrale bloeddruk en arteriële stijfheid.

Individualiseer hypertensiecontrole met 24 uren centrale bloeddrukanalyse om:

- Drukblootstelling van doelorganen te evalueren.
- De effecten van arteriële stijfheid en golfreflecties op bloeddruk te beoordelen.

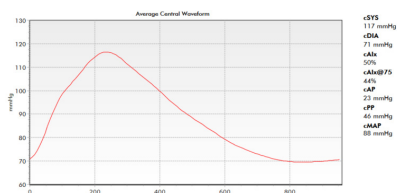

Technische specificaties

Het Oscar 2-systeem bestaat uit

Oscar 2-monitor
AccuWin Pro™ 4 (AWP4)-software (download)
2 Orbit™ ABPM-manchetten (Volwassene en Volwassene Plus)
Draagtasje en riem voor de patiënt
USB-interfacekabel
Gebruikershandleiding
Standaard twee jaar garantie

Algemene specificaties

Validaties:	BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI SP10:2002
BP Technique:	Oscillometrie met stapsgewijze deflatie
Bloeddruk bereik:	25-260 mmHg
Hartslag bereik:	40-200 slagen per minuut
Meetperiodes:	3, instelbaar (wakker, tijdens slaap en speciaal)
Tijdsintervallen:	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 en 120 min.
'Event'-toets:	Programma om extra patiëntmetingen mogelijk te maken
Gegevensopslag:	Flashgeheugen voor maximaal 250 meetwaarden
Stroombron:	Twee AA-batterijen
Gewicht:	284 gram, inclusief batterijen
Afmetingen:	12 x 7 x 3 cm
Vereisten voor de pc:	USB-poort, Windows® XP of later
Vereisten voor de app:	Apple iPhone



Mit meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van onze bloeddruktechnologie van wereldklasse, weten wij zeker dat wij geen hartslag missen - en u dus ook niet. Het is waar wij voor staan. Het is SunTech Medical. **Het is het verschil in klinische betrouwbaarheid.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200,
Verenigde Staten
Tel.: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Verenigd Koninkrijk
Tel.: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2--3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





SunTech Oscar2 Onderdeelnummers

Oscar 2-systeemmonitors

99-0133-00	Oscar 2-monitor - standaard
99-0133-02	Oscar 2-monitor - met SphygmoCor
99-0133-10	Oscar 2-monitor - standaard - zonder AWP4
99-0133-12	Oscar 2-monitor - met SphygmoCor - zonder AWP4
98-0056-00	Oscar 2™ PowerPack-accessoireset

Orbit™ Comfort-bloeddrukmanchetten

98-0239-01	#1 Orbit™ ABPM-manchet (18-26 cm)
98-0239-02	#2 Orbit™ ABPM-manchet (26-34 cm)
98-0239-03	#3 Orbit™ ABPM-manchet (32-44 cm)
98-0239-04	#4 Orbit™ ABPM-manchet (42-55 cm)

Banden en riemen

98-0032-07	Oscar 2™-tasje
98-0037-00	Oscar 2™-riem

Programma voor uitgebreide garantie

99-0027-00	Met één jaar verlengde garantie
99-0027-03	Met drie jaar verlengde garantie

Algemene voorwaarden voor uitgebreide garantie

De uitgebreide garantie moet op één van de volgende manieren worden aangeschaft:

- Op het moment van de oorspronkelijke aankoop
- Voorafgaand aan het aflopen van de oorspronkelijke garantieperiode
- Voorafgaand aan het aflopen van de aangeschafte uitgebreide garantieperiode