



 SunTech® **Vet25™**
BP MONITOR



**Monitoraggio della pressione arteriosa
continuo e sporadico**
per animali da compagnia

SunTech Vet25

Il monitor portatile e ricaricabile SunTech® Vet25™ fornisce in modo semplice e rapido misurazioni affidabili della pressione arteriosa per esami sul benessere, controlli sporadici e durante il monitoraggio degli animali da compagnia prima e dopo la procedura. È possibile impostare intervalli automatici per le misurazioni della pressione arteriosa durante un periodo di monitoraggio. Utilizzando la comprovata tecnologia per la misurazione della PA in ambito veterinario Advantage™, il Vet25 esegue in modo silenzioso misurazioni PA in grado di tollerare il movimento, fornendo risultati accurati. L'intuitiva interfaccia touchscreen fornisce agli utenti tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA.

Caratteristiche standard

Affidabile: Grazie alla tecnologia con tolleranza del movimento di SunTech, il Vet25 ha un elevato tasso di successo per quanto riguarda le misurazioni della PA.

Semplice da usare: L'intuitiva interfaccia touchscreen fornisce tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA. Progettato per cliniche veterinarie, non per i ricercatori.

Accurato: L'algoritmo della PA è stato appositamente progettato per gli animali da compagnia da esperti di una delle principali facoltà di veterinaria.

Monitoraggio

continuo: Il monitoraggio durante le procedure è molto semplice, con intervalli definiti dall'utente per la misurazione PA.


Memoria: Vengono memorizzati fino a 960 punti dati, anche quando il dispositivo è spento. L'utente può selezionare misurazioni specifiche dalla memoria del dispositivo e calcolare automaticamente la media della PA.

Portatile: Dispositivo alimentato a batteria, facile da spostare nelle diverse sedi di monitoraggio.

Ricaricabile: La batteria si ricarica quando il dispositivo è collegato all'alimentazione CA, riducendo gli scarti di batterie usa e getta.

Trasferimento

dati: I dati possono essere trasferiti in un'applicazione software per la determinazione delle tendenze e la creazione di report su un PC che utilizza Bluetooth. Utilizzare l'applicazione per PC per esportare i report in formato PDF o CSV.

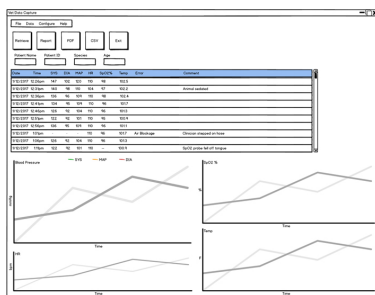



Specifiche tecniche

Il Vet25 include:

- Monitor del sistema Vet25
- Struttura protettiva in rosa fenicottero, blu pavone o verde rana
- Bracciali PA per uso veterinario, misure 1-6
- Tubicino paziente, 1,8 m
- Adattatore CA

Specifiche generali

Sistolica:	Da 40 a 265 mmHg
Diastolica:	Da 20 a 200 mmHg
Pressione arteriosa media:	Da 27 a 222 mmHg
Frequenza cardiaca:	Da 25 a 300 bpm
Peso del dispositivo:	circa 950 grammi (con la batteria)
Dimensioni:	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garanzia:	2 anni per il monitor 90 giorni per bracciali/tubicino

Accessori

Struttura protettiva del SunTech Vet25

La struttura protettiva rimovibile è disponibile in 3 colori ed è dotata di una pratica maniglia.



Rosa fenicottero



Blu pavone



Verde rana

Adattatore CA

Il Vet25 è un dispositivo portatile che può essere facilmente spostato da sala a sala qualora necessario. Basta semplicemente collegare l'adattatore CA per ricaricare la batteria agli ioni di litio del Vet25. L'adattatore CA include configurazioni per 4 tipi di spinotti per soddisfare i requisiti di alimentazione a livello internazionale.

Bracciali per uso veterinario SunTech



Materiali morbidi e angoli arrotondati forniscono una soluzione delicata per i bracciali. I bracciali PA di SunTech Medical sono codificati a colori per una selezione rapida della misura adatta; gli indicatori del range assicurano un posizionamento accurato del bracciale. Il dispositivo PA Vet25 ha in dotazione bracciali di misura 1-6. **I bracciali PA di SunTech possono essere utilizzati con altri monitor per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario. Richiedere informazioni sul kit per la conversione di bracciali veterinari di SunTech.**


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade[®]

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia di livello mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. **È la differenza che fa il grado clinico.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel.: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inghilterra
Tel.: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Vendite)
+ 86.755.29588665 (Assistenza)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Cod. art. SunTech Vet25

Monitor del sistema Vet25

- 99-0170-00 Monitor Vet25, struttura rosa fenicottero
- 99-0170-01 Monitor Vet25, struttura blu pavone
- 99-0170-02 Monitor Vet25, struttura verde rana

Bracciali PA per uso veterinario SunTech

98-0400-80	Bracciale 1	Confezione da 20	Range 3-6 cm
98-0400-81	Bracciale 2	Confezione da 20	Range 4-8 cm
98-0400-82	Bracciale 3	Confezione da 20	Range 6-11 cm
98-0400-83	Bracciale 4	Confezione da 20	Range 7-13 cm
98-0400-84	Bracciale 5	Confezione da 20	Range 8-15 cm
98-0400-F1	Bracciale 6	Confezione da 20	Range 12-19 cm
98-0400-F3	Bracciale 7	Confezione da 20	Range 17-25 cm
98-0240-00	Bracciali 1-6	Confezione da 6	
91-0028-75	Tubicino paziente, 1,8 metri		
91-0028-76	Tubicino paziente, 3 metri		

Accessori

- 39-0195-03 Struttura rosa fenicottero
- 39-0195-04 Struttura blu pavone
- 39-0195-02 Struttura verde rana
- 19-0020-00 Adattatore CA
- 98-0900-01 Batteria agli ioni di litio di ricambio

Programma di garanzia estesa

- 83-0022-00 Garanzia estesa per un anno
- 83-0022-01 Garanzia estesa per tre anni

Termini e condizioni della garanzia estesa

La garanzia estesa può essere acquistata:

- Al momento dell'acquisto originale
- Prima del termine del periodo di garanzia iniziale