



 SunTech® **Vet25™**  
BP MONITOR




**Monitor de mediciones puntuales y  
continuas de PA**  
para animales de compañía

# SunTech Vet25

El monitor portátil y recargable SunTech® Vet25™ mide la presión arterial (PA) de manera rápida, sencilla y fiable en el marco de exámenes de bienestar, verificaciones puntuales y durante el control previo y posterior a un procedimiento en animales de compañía. Es posible ajustar intervalos para que automáticamente se realicen lecturas de PA durante un período de monitorización. Mediante el uso de la probada tecnología Advantage™ de SunTech para PA veterinaria, el Vet25 toma mediciones de PA que son silenciosas, toleran el movimiento y proporcionan resultados precisos. La interfaz de pantalla táctil e intuitiva ofrece a los usuarios todas las funciones necesarias para revisar y analizar datos de PA.

## Funcionalidades estándar

- Fiable:** Gracias a la tecnología de SunTech con tolerancia al movimiento, el Vet25 tiene una alta tasa de éxito en las lecturas de PA.
- Fácil de usar:** La interfaz de pantalla táctil e intuitiva ofrece todas las funciones necesarias para revisar, analizar y transferir datos de PA. Diseñado para hospitales veterinarios, no para investigadores.
- Preciso:** El algoritmo de PA ha sido desarrollado específicamente para animales de compañía por expertos de una importante facultad de Veterinaria.
- Monitorización continua:** La monitorización durante los procedimientos es simple, con intervalos definidos por el usuario para la medición de PA.
- Memoria:** Se conservan hasta 960 registros de datos, incluso con el equipo apagado. El usuario puede seleccionar mediciones específicas de la memoria del equipo y realizar un promedio automatizado de PA.
- Portátil:** Equipo con funcionamiento a batería, fácil de llevar a diferentes sitios de monitorización.
- Recargable:** La batería se recarga cuando el equipo se enchufa a una fuente de CA, lo que reduce los residuos generados por las baterías desechables.
- Transferencia de datos:** Los datos pueden transferirse mediante Bluetooth a una aplicación de software para PC, que elabora informes y tendencias de datos. Utilice la aplicación de PC para exportar informes en formato PDF o CSV.

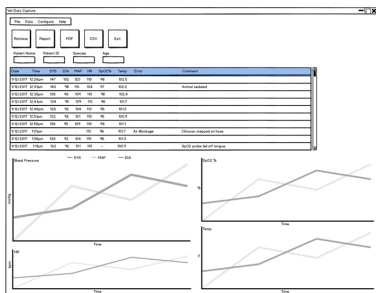



## Especificaciones técnicas

### El Vet25 incluye:

- Monitor de sistema Vet25
- Coraza protectora en color rosa "flamenco", azul "pavo real" o verde "rana arborícola"
- Manguitos de presión arterial para uso veterinario, tamaños 1-6
- Tubo de paciente (1,8 m)
- Adaptador de CA

## Especificaciones generales

<b>Sistólica:</b>	40 - 265 mmHg
<b>Diastólica:</b>	20 - 200 mmHg
<b>Presión arterial media:</b>	27 - 222 mmHg
<b>Frecuencia cardíaca:</b>	25 - 300 LPM
<b>Peso del equipo:</b>	aprox. 950 gramos (con batería)
<b>Dimensiones:</b>	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
<b>Garantía:</b>	2 años en el monitor 90 días en manguitos/tubo

## Accesorios

### Coraza del SunTech Vet25

La coraza protectora desmontable se encuentra disponible en 3 colores e incluye un asa de gran practicidad.



Rosa "flamenco"



Azul "pavo real"



Verde "rana arborícola"

### Adaptador de CA

El Vet25 es un equipo portátil, que en caso necesario puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Solamente hay que enchufar el adaptador de CA para recargar la batería de iones de litio en el Vet25. El adaptador de CA incluye 4 configuraciones de enchufes para ajustarse a la mayoría de los requisitos internacionales en materia de alimentación eléctrica.

## Manguitos para uso veterinario de SunTech



Los materiales suaves y los ángulos redondeados proporcionan una solución agradable para los manguitos. Los manguitos de PA de SunTech Medical están codificados por colores para permitir una rápida selección del tamaño. Los indicadores de rango aseguran un ajuste preciso. El suministro del equipo de PA Vet25 incluye manguitos de tamaños 1-6. **¡Los manguitos de PA para uso veterinario de SunTech pueden utilizarse con otros monitores de PA de uso veterinario! Consulte acerca de nuestro kit de conversión para manguitos de uso veterinario de SunTech.**

  
**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
The Difference in Clinical Grade<sup>™</sup>

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra tecnología de presión arterial de categoría mundial, sabemos que ni nosotros ni usted perderemos el pulso. Es nuestro legado. Es SunTech Medical. **Es la diferencia a nivel clínico.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
Inglaterra  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Ventas)  
+ 86.755.29588665 (Servicio Técnico)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Números de piezas del SunTech Vet25

### Monitores de sistema Vet25

99-0170-00	Monitor Vet25, coraza en rosa "flamenco"
99-0170-01	Monitor Vet25, coraza en azul "pavo real"
99-0170-02	Monitor Vet25, coraza en verde "rana arborícola"

### Manguitos de PA para uso veterinario de SunTech

98-0400-80	Manguito nº1	Caja de 20	Rango 3-6 cm
98-0400-81	Manguito nº2	Caja de 20	Rango 4-8 cm
98-0400-82	Manguito nº3	Caja de 20	Rango 6-11 cm
98-0400-83	Manguito nº4	Caja de 20	Rango 7-13 cm
98-0400-84	Manguito nº5	Caja de 20	Rango 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito nº6	Caja de 20	Rango 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito nº7	Caja de 20	Rango 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	Paquete de 6	
91-0028-75	Tubo de paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Tubo de paciente, 3 m		

### Accesorios

39-0195-03	Coraza en rosa "flamenco"
39-0195-04	Coraza en azul "pavo real"
39-0195-02	Coraza en verde "rana arborícola"
19-0020-00	Adaptador de CA
98-0900-01	Batería de iones de litio de reemplazo

### Programa de Garantía Extendida

83-0022-00	Garantía Extendida de un año
83-0022-01	Garantía Extendida de tres años

### Términos y condiciones de la Garantía Extendida

La Garantía Extendida puede ser adquirida:

- En el momento de la venta original
- Antes de que finalice el período de garantía inicial