



 SunTech® **Vet30™**
VITAL SIGNS



**Monitor per la misurazione continua
dei segni vitali**
per animali da compagnia

SunTech Vet30

Il monitor portatile e ricaricabile SunTech® Vet30™ fornisce in modo semplice e rapido misurazioni affidabili della pressione arteriosa, della saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e della temperatura durante il monitoraggio di animali da compagnia prima e dopo la procedura. È possibile impostare intervalli automatici per le misurazioni della pressione arteriosa durante un periodo di monitoraggio. Utilizzando la comprovata tecnologia per la misurazione della PA in ambito veterinario Advantage™, il SunTech Vet30 esegue in modo silenzioso misurazioni PA in grado di tollerare il movimento, fornendo risultati accurati. Il dispositivo esegue inoltre la misurazione continua di temperatura e SpO₂. L'intuitiva interfaccia touchscreen fornisce tutte le funzionalità necessarie per esaminare, analizzare e trasferire i dati relativi ai segni vitali.

Caratteristiche standard

3-in-1: L'affidabile tecnologia per la misurazione della PA di SunTech si arricchisce ora delle misurazioni di pulsossimetria e temperatura.

Semplice da usare: Interfaccia touchscreen intuitiva a colori.

Accurato: L'algoritmo della PA è stato appositamente progettato per gli animali da compagnia da esperti di una delle principali facoltà di veterinaria.


Monitoraggio continuo: Il monitoraggio durante le procedure è molto semplice, con intervalli definiti dall'utente per la misurazione PA.

Portatile: Dispositivo alimentato a batteria, facile da spostare nelle diverse sedi di monitoraggio.

Ricaricabile: La batteria si ricarica quando il dispositivo è collegato all'alimentazione CA, riducendo gli scarti di batterie usa e getta.

Memoria: Vengono memorizzati fino a 960 punti dati, anche quando il dispositivo è spento. L'utente può selezionare misurazioni specifiche dalla memoria del dispositivo e calcolare automaticamente la media della PA.

Trasferimento dati: I dati possono essere trasferiti in un'applicazione software per la determinazione delle tendenze e la creazione di report su un PC che utilizza Bluetooth. Utilizzare l'applicazione per PC per esportare i report in formato PDF o CSV.

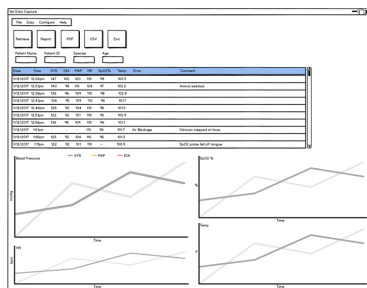



Specifiche tecniche

Il Vet30 include

- Monitor del sistema Vet30
- Struttura protettiva in rosa fenicottero, blu pavone o verde rana
- Bracciali PA per uso veterinario, misure 1-6
- Tubicino paziente, 1,8 m
- Sonda temperatura AccuVet™
- Sensore a Y per la SpO₂ con clip
- Adattatore CA

Specifiche generali

Sistolica: Da 40 a 265 mmHg
Diastolica: Da 20 a 200 mmHg
PA media: Da 27 a 222 mmHg
Frequenza cardiaca: Da 25 a 300 bpm
Peso: circa 1200 grammi (con la batteria)
Dimensioni: 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garanzia: 2 anni per il monitor
 1 anno per gli accessori
 AccuVet
 6 mesi per gli accessori Masimo
 90 giorni per bracciali/tubicini

AccuVet
Range temp.: Da 26° C a 46° C
Accuratezza temp.: ±0,3° C oltre alla tolleranza del sensore temperatura
Sensore temp.: Compatibile con YSI 400
Range SpO₂: 0-99% SpO₂ funzionale
Accuratezza SpO₂: ±2 al 70-99%,
 Non specificata se inferiore al 70%
Range frequenza polso: 18-400 bpm
Accuratezza frequenza polso: ±2% o 2 bpm, a seconda di quale sia il valore superiore
Masimo™
Range SpO₂: 0-100%
Accuratezza SpO₂: ±2% in assenza di movimento
 ±3% a bassa perfusione
Range frequenza polso: 0-239 bpm
Accuratezza frequenza polso: ±3 bpm in assenza di movimento

Accessori

Struttura protettiva del SunTech Vet30

La struttura protettiva rimovibile è disponibile in 3 colori ed è dotata di una pratica maniglia.



Rosa fenicottero



Blu pavone



Verde rana

Adattatore CA

Il Vet30 è un dispositivo portatile che può essere facilmente spostato da una sala all'altra in caso di necessità. Basta semplicemente collegare l'adattatore CA per ricaricare la batteria agli ioni di litio del Vet30. L'adattatore CA include configurazioni per 4 tipi di spinotti per soddisfare i requisiti di alimentazione a livello internazionale.

Temperatura e SpO₂

Termometria AccuVet



SpO₂ AccuVet o SpO₂ Masimo SET®



Bracciali per uso veterinario SunTech



Materiali morbidi e angoli arrotondati forniscono una soluzione delicata per i bracciali. I bracciali PA di SunTech Medical sono codificati a colori per una selezione rapida della misura adatta; gli indicatori del range assicurano un posizionamento accurato del bracciale. Il dispositivo PA Vet30 ha in dotazione bracciali di misura 1-6. **I bracciali PA di SunTech possono essere utilizzati con altri monitor per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario. Richiedere informazioni sul kit per la conversione di bracciali veterinari di SunTech.**

**SunTech Medical**[®]
The Difference in Clinical Grade[®]

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia di livello mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. **È la differenza che fa il grado clinico.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel.: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Vendite)
+ 86.755.29588665 (Assistenza)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Cod. art. SunTech Vet30

Monitor del sistema Vet30

99-0171-00	Monitor Vet30 con SpO ₂ AccuVet, struttura rosa fenicottero
99-0171-01	Monitor Vet30 con SpO ₂ AccuVet, struttura blu pavone
99-0171-02	Monitor Vet30 con SpO ₂ AccuVet, struttura verde rana
99-0172-00	Monitor Vet30 con SpO ₂ Masimo, struttura rosa fenicottero
99-0172-01	Monitor Vet30 con SpO ₂ Masimo, struttura blu pavone
99-0172-02	Monitor Vet30 con SpO ₂ Masimo, struttura verde rana

Bracciali PA per uso veterinario SunTech

98-0400-80-VET	Bracciale 1	Confezione da 20	Range 3-6 cm
98-0400-81-VET	Bracciale 2	Confezione da 20	Range 4-8 cm
98-0400-82-VET	Bracciale 3	Confezione da 20	Range 6-11 cm
98-0400-83-VET	Bracciale 4	Confezione da 20	Range 7-13 cm
98-0400-84-VET	Bracciale 5	Confezione da 20	Range 8-15 cm
98-0400-F1	Bracciale 6	Confezione da 20	Range 12-19 cm
98-0400-F3	Bracciale 7	Confezione da 20	Range 17-25 cm
98-0240-00	Bracciali 1-6	Confezione da 6	
91-0028-75	Tubicino paziente, 1,8 metri		
91-0028-76	Tubicino paziente, 3 metri		

Temperatura

52-0022-00	Sonda temperatura AccuVet, 2 m
52-0023-00	Sonda temperatura AccuVet, 3 m

SpO₂

52-0019-00	Sensore linguale a Y per la SpO ₂ AccuVet, 2 m, con 2 clip
52-0020-00	Sensore a riflettanza rettale per la SpO ₂ AccuVet, 1,8 m
52-0021-00	Cavo prolunga per la SpO ₂ AccuVet, 2 m
52-0024-00	Sensore SpO ₂ M-LNCS™ YI AH Masimo, 0,9 m, con 3 clip
52-0026-00	Sensore (transflettanza) SpO ₂ M-LNCS™ TF-I AH Masimo, 0,9 m
52-0012-01	Cavo paziente serie M-LNCS™ Masimo, 3 m
52-0025-00	Clip di ricambio per SpO ₂ AH Masimo (3 misure)

Accessori

39-0195-03	Struttura rosa fenicottero
39-0195-04	Struttura blu pavone
39-0195-02	Struttura verde rana
19-0020-00	Adattatore CA
17-0026-00	Batteria agli ioni di litio di ricambio

Cod. art. SunTech Vet30 (segue)

Programma di garanzia estesa

83-0023-00 Garanzia estesa per un anno

83-0023-01 Garanzia estesa per tre anni

Termini e condizioni della garanzia estesa

La garanzia estesa può essere acquistata:

- Al momento dell'acquisto originale
- Prima del termine del periodo di garanzia iniziale